


# ASTOFLO® PLUS eco

## Θερμαντής αίματος και ορού

Το ASTOFLO PLUS ECO είναι ένας θερμαντής ευρείας χρήσης για όλους τους ορούς και τα προϊόντα αίματος σε χειρουργικές επεμβάσεις, σε Μ.Ε.Θ. και σε όλους τους τομείς της ιατρικής.

Στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο θερμαντικό προφίλ θερμαίνονται όλα τα υγρά - χωρίς ειδικό εξάρτημα μίας χρήσης - στη διάταξη ορού και διατηρούνται ζεστά μέχρι να φτάσουν στην κάνουλα ορού του ασθενούς.

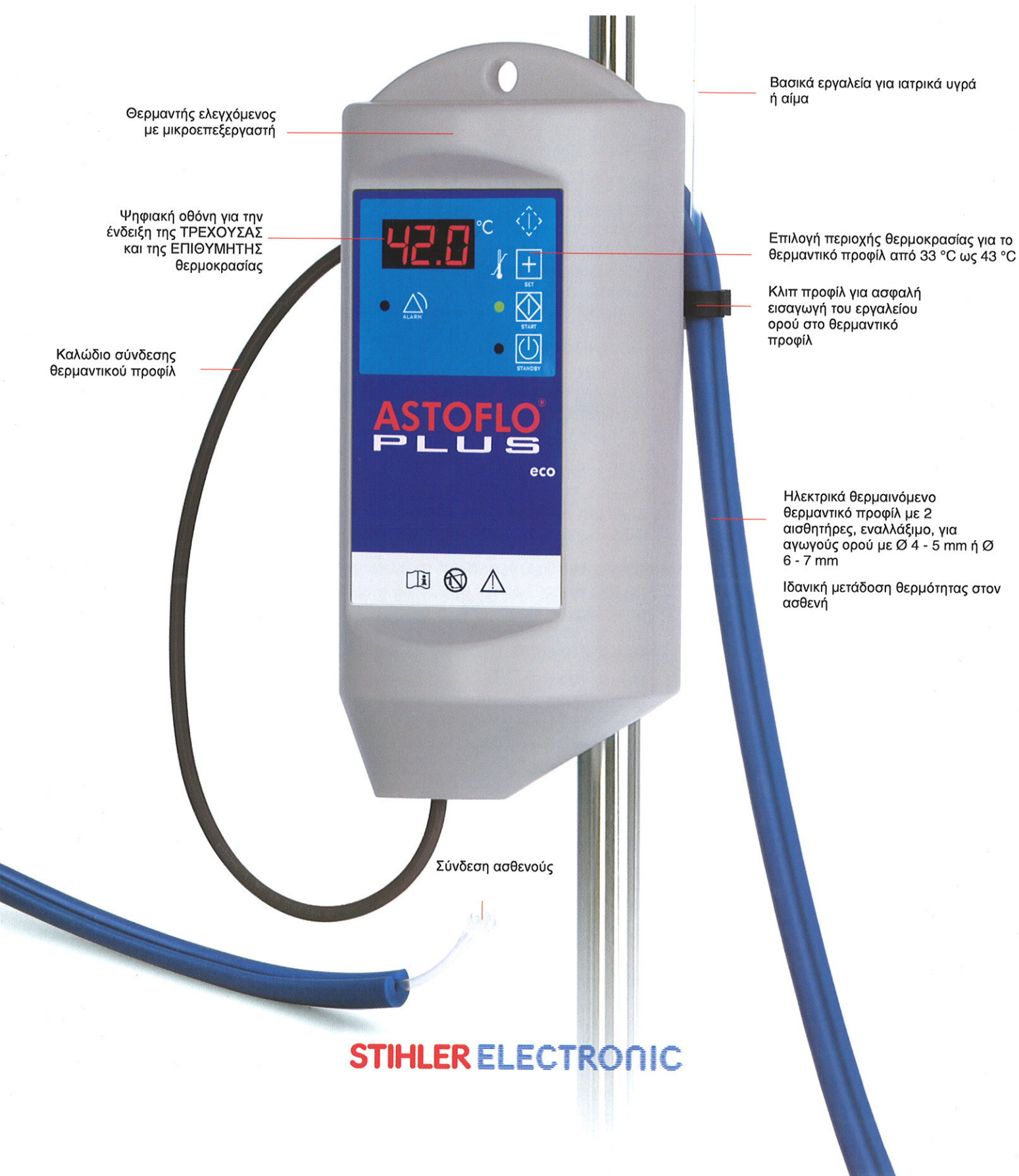

Θερμαντής ελεγχόμενος με μικροεπεξεργαστή

Ψηφιακή οθόνη για την ένδειξη της ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ και της ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ θερμοκρασίας

Καλώδιο σύνδεσης θερμαντικού προφίλ

Σύνδεση ασθενούς

Βασικά εργαλεία για ιατρικά υγρά ή αίμα

Επιλογή περιοχής θερμοκρασίας για το θερμαντικό προφίλ από 33 °C ως 43 °C

Κλιπ προφίλ για ασφαλή εισαγωγή του εργαλείου ορού στο θερμαντικό προφίλ

Ηλεκτρικά θερμαινόμενο θερμαντικό προφίλ με 2 αισθητήρες, εναλλάξιμο, για αγωγούς ορού με Ø 4 - 5 mm ή Ø 6 - 7 mm

Ιδανική μετάδοση θερμότητας στον ασθενή

**STIHLER ELECTRONIC**

# ASTOFLO® PLUS eco

## Θερμαντής αίματος και ορού


Ο απλός και οικονομικός τρόπος αποτελεσματικής θέρμανσης όλων των ορών και υγρών μετάγγισης!

- Το ηλεκτρικά θερμαινόμενο θερμαντικό προφίλ με ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας εγγυάται βέλτιστη θέρμανση και ύψιστη ασφάλεια χάρη στη ρύθμιση που εξαρτάται από τη ροή.
- Το υγρό θερμαίνεται ενεργά με ξηρή στιγμιαία μέθοδο κατά τη διαδρομή προς τον ασθενή, μέχρι που να φτάσει στην κάνουλα του ασθενούς. Τα προθερμασμένα διαλύματα διατηρούνται θερμά μέχρι να φτάσουν στον ασθενή, ακόμα και όταν η ροή είναι μεγάλη.
- Διατίθενται δύο είδη θερμαντικών προφίλ ανάλογα με την ιατρική χρήση.
- Προφίλ WP31 / WP32
  - Για όλους τους τυπικούς ορούς και τα εξαρτήματα ορών με εξωτερική διάμετρο περίπου 4 mm, για χειρουργικές επεμβάσεις, Μ.Ε.Θ. και τις τυπικές νοσηλευτικές μονάδες.
  - Για διάλυση και διήθηση αίματος, για τη θέρμανση αγωγών επιστροφής αίματος.
  - Το προφίλ WP31 / WP32 διατίθεται σε μήκος 180 cm και 240 cm.
- Προφίλ WP33 / WP34
  - Για όλες τις ιατρικές χρήσεις, όπου χρησιμοποιείται και το προφίλ WP31/WP32, στις οποίες χρησιμοποιούνται εξαρτήματα με εξωτερική διάμετρο περίπου 6 - 7 mm.
  - Το προφίλ WP33 / WP34 διατίθεται σε μήκος 180 cm και 240 cm.
- Στοιχεία παραγγελίας  
Θερμαντής ASTOFLO PLUS ECO  
Κωδικός: AFP300 - Καλώδιο ρεύματος για θερμαντικό προφίλ 40 cm  
Κωδικός: AFT302 - Καλώδιο ρεύματος για θερμαντικό προφίλ 80 cm

### Απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία: 1 εναλλάξιμο προφίλ

- Προφίλ WP31 / WP32 (μπλε) για εξαρτήματα με εξωτερική διάμετρο 4 - 5 mm  
Μήκος 180 cm Κωδικός: WP31  
Μήκος 240 cm Κωδικός: WP32
- Προφίλ WP33 / WP34 (γκρι) για εξαρτήματα με εξωτερική διάμετρο 6 - 7 mm  
Μήκος 180 cm Κωδικός: WP33  
Μήκος 240 cm Κωδικός: WP34

Ο αντιπρόσωπός σας

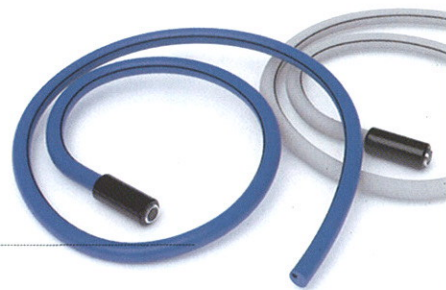

CLASSIFIED  
UL US  
MEDICAL ELECTRICAL  
EQUIPMENT  
UL 60601-1 AND  
CAN/CSA C22.2 601.1  
75JA



## STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hoelder-Strasse 36 · 70597 Stuttgart · Germany  
Telefon +49 (0) 711-720670 · Telefax +49 (0) 711-7206757  
www.stihlerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerelectronic.de